

겔화법에서 MRX2000으로

눈으로 보던 반응을 장비가 시간별 수치로 기록합니다

겔화법

반응 후 겔 생성 여부를
눈으로 확인

결과는 주로 양성·음성 판정

MRX 비탁법

반응 중 탁도 변화를
일정 간격으로 측정

곡선과 수치로 정량 분석

핵심 시약 반응 원리는 같고, 판정 도구가 눈에서 장비로 바뀝니다



96웰 플레이트의 탁도 변화를 반복 측정

시험은 4단계, 기본 원리는 그대로

MRX가 반응의 변화를 읽고, 소프트웨어가 시간별 OD를 보여줍니다

1

시료와 대조군 준비

표준액, 음성대조, 시료, PPC를 플레이트에 배치

2

측정 조건 설정

비탁법 340 nm, 37 °C 유지, 반복 측정 간격 설정

3


Kinetic 측정

96웰의 OD 변화를 시간에 따라 자동 기록

4

결과 확인

표준곡선 적합성과 PPC 회수율 등 시험 유효성 확인

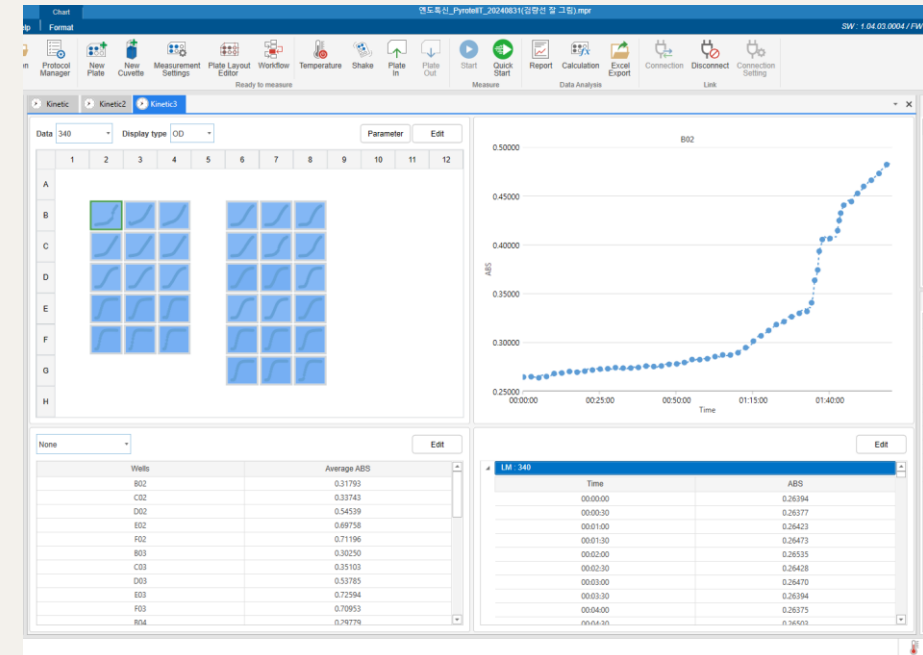

시간별 OD 곡선이 올라오는 시점을 이용해 시료를 비교합니다

카탈로그 검증 예시: 37 °C, 340 nm, 총 2시간, 30초 간격. 실제 시험 조건은 사용하는 시약의 IFU와 CoA를 우선합니다.

도입 초기에는 이 순서로 익히면 됩니다

처음부터 실제 시료를 많이 돌리기보다 대조군으로 판정 흐름을 익히는 방식이 안전합니다

그대로 유지되는 것

- 엔도톡신 프리 작업 습관
- 표준액과 음성대조 구성
- 간섭 확인과 PPC 회수율
- 시약별 시험 조건 준수

새로 익힐 것

- 플레이트 배치와 웰 지정
- 340 nm Kinetic 조건 설정
- OD 곡선과 Onset Time 확인
- 표준곡선과 시험 유효성 검토

첫 데모 권장

- 1회차** 표준액 + 음성대조 + PPC만 측정
- 2회차** 기존에 아는 시료를 함께 측정
- 3회차** 시험법 이전용 반복성·간섭 검토



소프트웨어 확인

현재 Kinetic 모드는 시간별 OD를 제공합니다. 농도·PPC·PASS/FAIL 자동 계산은 적용 소프트웨어 버전과 라이선스를 도입 전에 확인해야 합니다.